

Schodolez pásový SW03 se sedačkou - skládací



OBSAH

1. O produktu	str.1-str.3
(1) Popis produktu	str.1
(2) Analýza výrobku	str.2-str.3
2. Bezpečnostní upozornění	str.4
3. Bezpečnostní opatření před použitím	str.5
4. Použití a bezpečnostní opatření	str.6-str.10
A - Bezpečnostní kontrola před použitím	str.6
B - Příprava na výstup do patra a podrobnosti o provozu	str.6-str.7
C - Podrobnosti o provozu nahoru a dolů	str.9-str.10
D - Technické základy výstupu po schodech	str.10
5. Použití nabíjení baterie	str.11
6. Kontrola a údržba	str.12-s.13
7. Technické parametry	str.14

O produktu:

- Model výrobku: DW-ST003A / DW-SW03
- Popis produktu: Výrobek je vybaven systémem pro připojení k elektrické síti a pro připojení k elektrické síti: Tento výrobek je

navržen tak, aby umožnil vyškoleným pečovatelům používat zařízení pro překonávání schodiště s uživatelem schodolezu. Díky tomu mohou se lidé, kteří nemohou chodit nahoru a dolů po schodech. pohybovat po schodech ; Může také přepravovat osoby s problémy s pohyblivostí nahoru a dolů po schodech. Tento výrobek je určen především pro domácí použití a vícepodlažní budovy bez výtahů. Je bezpečný, jednoduchý, rychlý a snadno se skládá.

Popis produktu:



- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Odnímatelný polštář | 7. Tlačítko zatahovací přední rukojeti |
| 2. Přední rukojeť | 8. Baterie |
| 3. Bezpečnostní pás | 9. Napájecí klíč |
| 4. Podpůrný rám invalidního vozíku | 10. Šplhací pásů |
| 5. Skládací pedály | 11. Zadní rukojeť |
| 6. Výsuvné přední madlo | 12. Pevné tlačítko zadní rukojeti |







- 13. Ovládací panel
- 14. Páka zámku vázací tyče
- 15. Sklopná zadní rukojeť
- 16. Pomocná příčka

- 17. Drážka pro převodovku
- 18. Gumová pásůa
- 19. Motor
- 20. 10palcová nenafukovací kola

UPOZORNĚNÍ

1. Před instalací nebo používáním tohoto výrobku musí uživatel dodržovat pokyny prodejních techniků a pečlivě si přečíst "Návod k obsluze tohoto výrobku", aby si procvičil skutečnou obsluhu. A poté, co technici potvrdí, že bezpečný provoz je správný, lze zařízení používat samostatně.

2. Tento výrobek nelze používat na točitých schodech, zakřivených schodech, schodech s úhlem větším než 50° nebo větším a na schodech s drsným povrchem.

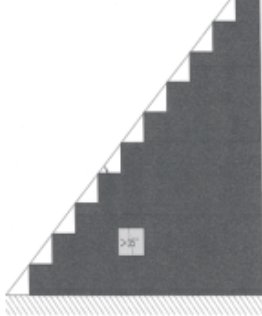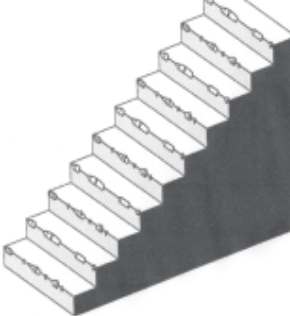			
Točité schody	Zakřivené schody	Schody s úhlem více než 50°	Drsný a nerovný povrch schodů

3. Tento výrobek je omezen na přepravu 1 osoby najednou. Při jeho používání se nezapomeňte připoutat bezpečnostním pásem.

4. Před použitím nezapomeňte zkontrolovat příslušné bezpečnostní kontroly (například: pásů, kapacitu baterie, sbírku různých slotů na karty atd.)

5. Nosnost je omezena v rámci 160 kg. Nepřetěžujte ji prosím.

6. Nedovolte, aby se k tomuto výrobku přibližovaly malé děti a domácí zvířata.

7. Používejte prosím originální baterii, nabíjejte ji v suchém prostředí.

8. Baterii tohoto výrobku lze použít opakovaně. Pokud ji potřebujete vyměnit, kontaktujte nás pro výměnu. Neotvírejte ji prosím sami ani ji nevyměňujte, abyste předešli nebezpečí. Vyměněnou baterii zlikvidujte v souladu se zákonem o likvidaci odpadu v každé zemi.

9. V případě poškození výrobku se obraťte na místního zástupce. Tento výrobek může opravovat pouze odborný personál údržby.

10. Nepoužívejte násilím nefunkční nebo silně opotřebovaný schodolez.

OPATŘENÍ PŘED POUŽITÍM

1. Obsluhovat by měli muži mladší 50 let, starším a nemohoucím osobám je obsluha zakázána!
2. Obsluha se nesmí od začátku do konce pustit opěrky - držet oběma rukama!
3. Během obsluhy silně stlačujte opěrku, abyste udrželi celkovou rovnováhu schodišťového křesla! Pokud nemůžete zařízení plně ovládat, musíte mít k dispozici asistenta, který udrží rovnováhu.
4. Při rozjezdu do schodů se schodišťová židle zpočátku nakloní, nezapomeňte stisknout opěrku rukojeti!
5. Pokud potřebujete zastavit v polovině cesty, musíte zajistit, aby se pásů dotýkala tří schodů současně!
6. Při sestupu z prvních dvou schodů byste se měli na chvíli zastavit, abyste se ujistili, že se pásová pásů plně dotýká schodů, a udrželi tak rovnováhu!
7. Při sestupování ze schodů by se přední kolečka pásového vozíku měla co nejvíce držet od okraje schodů. V této době nakloňte přední kolečka a provedte. pásové pásů dotýkaly země. Oběma rukama se přidržujte opěrek, abyste udrželi rovnováhu. schodišťové židle. Stisknutím tlačítka dole kdykoli nastavte schodišťovou židli do rovnováhy.
8. Pokud se nejedná o mechanickou závadu výrobku, také se neřídí pokyny, uživatel by měl být zodpovědný za své vlastní zranění!
9. Při výstupu a sestupu po schodech, aby se zabránilo převrácení cestujících vlevo a vpravo, nezapomeňte otevřít přední madla na obou stranách. Když se schodiště židle funguje, připevněte se prosím bezpečnostním pásem.
10. Provoz na schodech: Na schodech, jejichž úhel je menší než 1,5 m, nepoužívejte tento stroj. vyšší než 50° , nebo schodiště s olejem, ledem, vlhkostí. Provozování schodišťové židle v šikmém směru na schodech je hlavní příčinou nehod, které jsou velmi nebezpečné! Při výstupu nahoru schodů musíte dávat pozor na zadní část těla! Při chůzi po schodech dolů musíte dávat pozor. na přední část.
11. Během provozu neopouštějte schodišťovou sedačku, kromě případů, kdy je to nutné v případě nouze. Cestující s hmotností nižší než 80 kg mohou být řízeni jednou obsluhou, aby mohli stoupat a po schodech dolů. Pro cestující s hmotností vyšší než 80 kg až 100 kg se doporučuje. přidat jednu osobu, která bude obsluze pomáhat při ovládání schodišťové sedačky.

POUŽITÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

A - Bezpečnostní kontrola před použitím :

1) Kontrola napájení: Tento výrobek má čtyři světla a tři kontrolky. zelené kontrolky indikují kapacitu (stiskněte a podržte tlačítko indikátoru napětí, abyste zkontrolovali kapacitu baterie

úroveň nabití baterie). Nepoužívejte jej, pokud svítí červená kontrolka. Používejte jej po úplném nabití (podrobnosti naleznete v části 11 strana), pokud svítí pouze jedna kontrolka, nabijte ji. před použitím.




2) Kontrola panelu: Zkontrolujte, zda funkce tlačítek nahoře a dole na panelu je normální.

3) Kontrola brzdy: zda lze brzdou ovládat. a zda se může úplně zastavit.

4) Kontrola zabezpečení: Zkontrolujte, zda je brzda v pořádku: Zda je bezpečnostní pás a šrouby jsou utaženy.

5) Kontrola pásů: Zkontrolujte, zda jsou koleje v pořádku. prasklá, zda není příliš opotřebovaná nebo se neuvolňuje. Pokud se vyskytne nějaká abnormalita, postupujte podle návodu k obsluze Odstraňování závad.



B - Příprava na cestu nahoru a podrobnosti o provozu : .

1) Pomozte umístit osobu nacházející se uprostřed pokoje. sedáku a zapněte bezpečnostní pás.

Opěrka hlavy: (2) Uvedte do provozu opěrku hlavy: Podle výšky cestujícího, opěrku umístěte na zadní stranu hlavy spolujezdce. hlavy a nastavte ji na vhodnou těsnost, přilepte ji suchý zip na obou stranách, abyste opěrku hlavy upevnili.



Bezpečnostní pás: Po usazení cestujícího připevněte sedadlo. pás, jak je znázorněno na obrázku, zasuňte zástrčku do bezpečnostního pásu. zásuvku, aby se zajistila, a nastavte délku bezpečnostního pásu tak, aby se cestující cítil pohodlně.

2) Zapněte vypínač napájení z baterie, otevřete pásů a nastavte úhel pásů do polohy. vhodného úhlu (týká se úhlu, který je pro obsluhu nejvhodnější pro vytažení lezecké sedačky nahoru). po schodech, obecně 35°~40° od vodorovné roviny. Tento úhel se snažte dodržet, když provozu, což může většinou pomoci ušetřit námahu. Nicméně vzhledem k výškovému rozdílu a délky paží obsluhy by měl být nejlepší úhel vhodně upraven podle podle obsluhy).

3) Přitáhněte stoupací židli k přední části schodů, nastavte výšku teleskopické tyče. podle toho, jak to obsluze vyhovuje (jak je znázorněno na obrázku), sešlápněte na silnou příčku rámu lezecké židle, nakloněte lezeckou židli a pokuste se lezeckou židli pásů více dotýkala schodů. Zapněte tlačítko vypínače napájení na teleskopické tyči, stiskněte tlačítko . nahoru a zároveň silně stiskněte teleskopickou tyč, abyste zabránili lezení po schodech. židli naklonit dopředu, a tak může lezecká židle vyjet nahoru. Při uvolnění tlačítka nahoru, přestane lezecká židle jezdit po schodech.




4) Seřízení táhla: Při provozu lezecké židle na plošině nastavte táhlo do nejnižší polohy. Při jízdě nahoru a dolů se snažte nastavit výšku vázací tyče tak, aby byla blízko výšky ramene obsluhy.

5) Zvětšete úhel vozíku: Stiskněte zajišťovací tyč směrem dovnitř a současně ji vytáhněte nahoru. Když se blíží ideální výšce, uvolněte tyč zámku a tlačte ji, dokud nedosáhnete uzamykacího kloubu.

6) Zmenšete úhel vozíku: Stiskněte tyč zámku směrem dovnitř a současně táhněte tyč zámku směrem dolů. Když se blíží požadované výšce, uvolněte tyč zámku a stiskněte ji, dokud nedosáhnete uzamykacího bodu.


PODROBNOSTI O PROVOZU NAHORU A DOLŮ

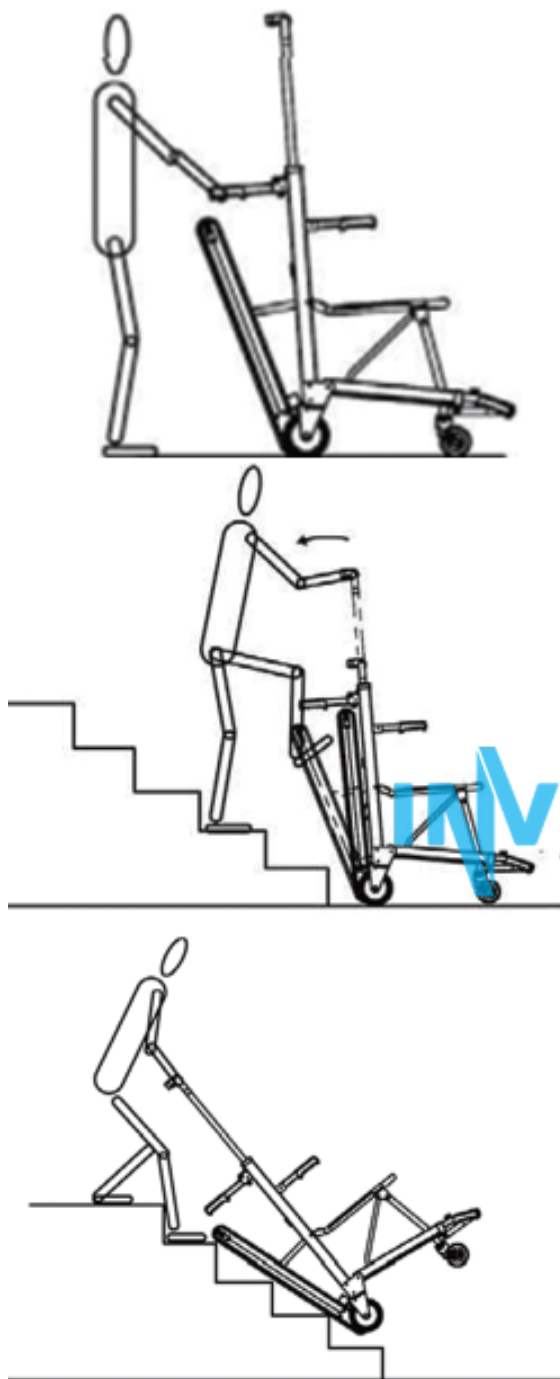


Rozložte lezeckou židli do stavu znázorněného na obrázku, zkontrolujte, zda je zapnuto napájení z baterie, a nastavte říditka do vhodné výšky.

Nakloňte schodolez, nastavte pásů do svislé polohy středu s okrajem schodů, když jsou zadní kola 30-40 cm od schodů, stoupněte si levou nohou na druhý schod, šlápněte na... pravou nohou na příčnou tyč schodolezu. Současně zatáhněte říditka směrem k sobě, dokud se kolejnice nedotkne schodišťových stupňů.

Stiskněte tlačítko napájení stoupací židle pro spuštění a použijte malou sílu směrem dolů ve svislém směru úhlu schodů. Stiskněte a podržte tlačítko schodů, abyste se pohybovali nahoru rychlostí lezecké židle.

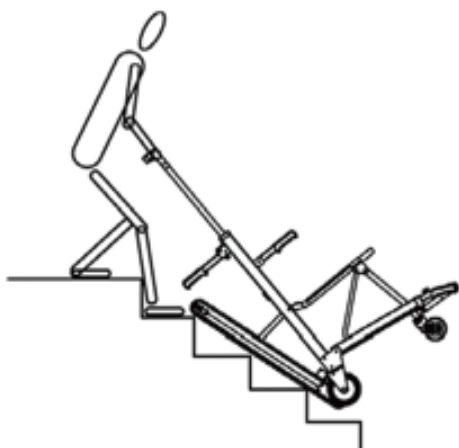

Pokud potřebujete v polovině cesty nahoru přestat, stačí uvolnit tlačítko nahoře.
Poznámka: Pokud se pásy lezecké židle dotýkají méně než 3 schody najednou, je třeba vyvinout malou sílu směrem dolů do svislého směru úhlu schodů, aby se lezecká židle nenaklápěla dopředu.

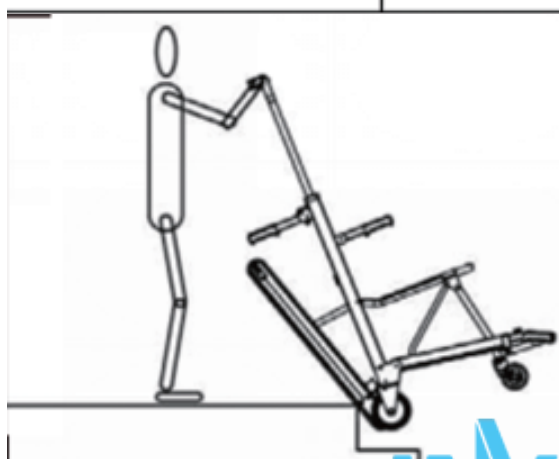

Když dosáhnete předposledního schodu, zatáhněte za táhlo oběma rukama do polohy, která není nižší než je výška hrudníku obsluhy. Stiskněte a podržte tlačítko nahoře a pomalu vytáhněte stoupací křeslo na zem.



Když přední kolo lezecké židle vjede na rovnou plochu, uvolněte tlačítko nahoře, šlápněte na příčník a vyjedte na zem. a pomalu zvedněte pravou nohou lezecké zařízení. nahoru a opatrně položte židli na rovnou plochu. na zem.




Držte zadní rukojeť a tlačte stoupací židli k jednomu schodišti.

Opakujte výše uvedené kroky

Doporučujeme také shlédnout instruktážní video.

TECHNICKÉ ZÁKLADY SCHODOLEZU

1) Při výstupu nahoru by obsluha měla vždy použít přiměřenou sílu k vytažení zpět rovnoměrně. Doporučuje se, aby obsluha postupovala podle těchto kroků a zvládla základní věci před zahájením provozu.

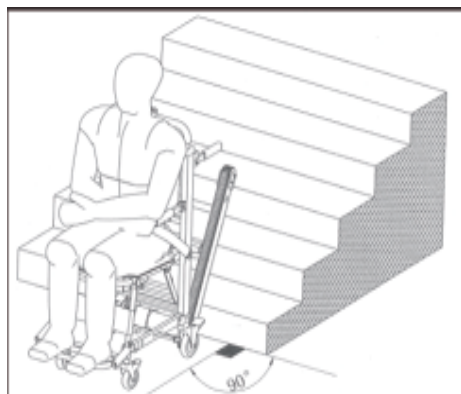

Obr. 1




Obr. 2


2) Při otáčení: Když schodolez dosáhne schodišťové plošiny, uvolněte spínač nahoře, nastavte schodolez do vodorovné polohy, aby se čtyři kola schodolezu otočila do vodorovné polohy, dotýkala země, a poté ji ovládejte tak, aby dokončila otáčení na prostřední plošinu schodiště. A pak pokračujte v následných operacích nahoře.

3) Nouzové zastavení na schodišti: Ze zvláštních důvodů musí obsluha zastavit na schodišti během postupu nahoru nebo dolů po schodech. Můžete uvolnit tlačítko nahoru / dolů a podržet říditka rukou. Při dočasném zastavení je třeba zajistit, aby se pásy dotýkaly alespoň 3 schodišťových stupňů najednou.

4) Při sestupu ze schodů: posuňte lezeckou židli dopředu tak, aby přední kola byla blízko k hraně prvního schodu. V tomto okamžiku jste připraveni sejít po schodech dolů. Poté zapněte baterii vypínač, nastavte úhel pásů podle provozních návyků obsluhy. Poté sešlápněte nohou na příčku rámu pásového podvozku a oběma rukama nakloněte pásový schodolez dozadu tak, aby se vozík mohl dotýkat země. Poté zapněte tlačítko vypínače na říditkách a stiskněte tlačítko pro sjezd dolů. Uvolněte tlačítko pro sestup dolů, aby schodolez přestal sjíždět dolů. Až se pás dotkne země, uvolněte tlačítko pro sestup dolů, zastavte otáčení motoru a narovnejte sklápěcí židličku tak, abyste mohli chodit po plošině schodů.

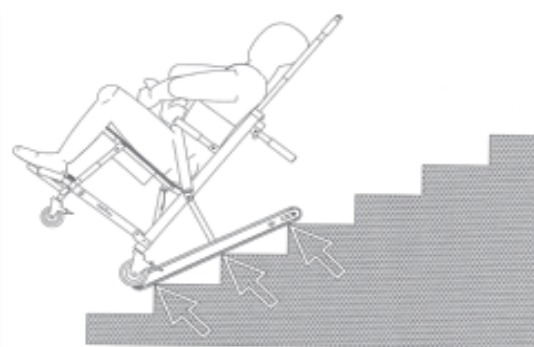

Správný postup

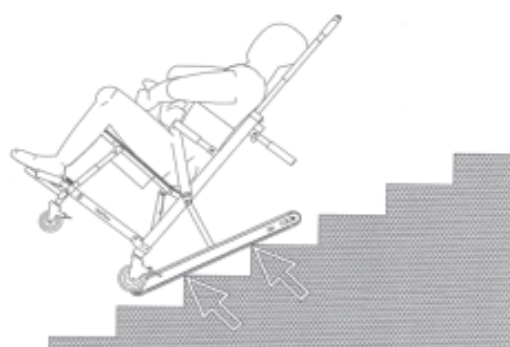

Nesprávný postup

POUŽITÍ PRO NABÍJENÍ BATERIE

- 1) Na straně baterie jsou čtyři kontrolky. Pokud svítí všechny tři zelené kontrolky, znamená to, že je baterie plně nabitá. Nepoužívejte ji, pokud svítí pouze jedna. červené světlo. Nabijte ji včas a používejte ji až po úplném nabití.
- 2) Před použitím nabíječky si přečtěte a dodržujte pokyny a varování na nabíječce.
- 3) Používejte pouze nabíječku odpovídající modelu Schodolezu k nabíjení.
- 4) Nabíječku je třeba pravidelně testovat a uchovávat ji mimo dosah oleje, ředidel a ostrých nástrojů apod.
- 5) Toto zařízení může být testováno a opravováno pouze u originálním výrobním závodě nebo opravovat u jeho autorizovaného distributora.
- 6) Nerozebírejte ani neměňte tuto nabíječku.
- 7) Při nabíjení dbejte na to, aby nabíječka nebyla ve vlhkém prostředí.
- 8) Nedotýkejte se prosím zásuvky nabíječky mokřkýma rukama.
- 9) Schodišťové křeslo nelze provozovat během nabíjení.



NÁVOD:

- ★ Po nabíjení odpojte zástrčku 220V AC nabíječky a poté odpojte výstupní zástrčku. Při připojování nebo odpojování zdroje napájení mějte suché ruce. Pokud během nabíjení zjistíte abnormálně vysokou teplotu nebo zvláštní zápach, okamžitě přestaňte nabíjet a obraťte se na distributora, aby provedl opravu.
- ★ Před prvním použitím baterii plně nabijte. Tím se zvýší životnost baterie.
- ★ Pro údržbu baterie nabíjejte baterii jednou měsíčně i v případě, že je schodolez nepoužíván – zabráníte tím poškození akumulátoru.

INSPEKCE A ÚDRŽBA

- ★ Pokud se vyskytnou jiné abnormality, poruchy nebo neznámé poškození dojde k poškození, neopravujte jej sami. Je to velmi nebezpečné, pokud se s ním dobře nezachází, obraťte se prosím na naši společnost nebo přímo distributora.

■ Úprava těsnosti pásů a její výměna.

Poznámka: Původní výrobce nebo distributor provedl seřízení pásů na správnou těsnost před tím, než vám ji prodal. Po utažení pásů po určitou dobu používána, se těsnost pásů je třeba odpovídajícím způsobem upravit.

Utáhněte šroub: Použijte nástroj podle obrázku. (Jak je znázorněno na obrázku) Otáčením klíče ve směru hodinových ručiček seřizujte pásy, dokud nebude pevně utažena (každý pás má dva seřizovací prvky, seřídte je prosím zvlášť, abyste zachovali vyváženost pásů).



2) Uvolněte šroub: Použijte nástroj, jak je znázorněno na obrázku (Jak je znázorněno na obrázku), otočte klíčem proti směru hodinových ručiček, abyste nastavili pásy, dokud nebude utažení odpovídající (každý pás má dva šrouby. seřizovače, seřídte je prosím samostatně, aby byla zachována rovnováha pásů.)



TECHNICKÉ PARAMETRY:

Velikost výrobku (L*W*H)	129cm*51cm*157cm(±1.5cm)
Rozměry pro skládání (L*W*H)	100cm*51cm*31cm(±1.5cm)
Čistá hmotnost (stroj)	29±1kg
Úhel dráhy	≤30° tedy max 30°
Mezní hodnota zatížení	≤160 kg
Rychlost stoupaní	Průměrně 40 steps/minute(±5%)
Nabíjecí napětí	100-240V 50/60Hz
Nepřetržitý výstup po schodišti max. °	Okolo 500 steps
Baterie	24V / 13.6Ah(Max)

■ Záruční servis:

- ★ Na rám tohoto výrobku se vztahuje dvouletá záruka. Na motor a baterii je poskytována záruka jeden rok.
- ★ Gumová dráha a gumové pneumatiky jsou spotřební materiál a nejsou zahrnuty do záručního servisu.
- ★ Právo na konečný výklad tohoto výrobku náleží továrně.

Prodej, distribuci a servis zajišťuje:

Invira s.r.o.
Paličkova 75/2
Ostrava – Nová Ves
709 00
Ičo: 29446287